

Blue Comfort (také nazýván L3) je třívrstvý laminát.

- je velmi pevná i během dlouhých operací a operací s vysokou vlhkostí
- vnější vrstva ze strany zdravotnického personálu je velmi savá a má velkou míru savosti, což eliminuje riziko odkapávání tekutin z povrchu roušky; potažená netkaná struktura zajišťuje roušce měkkost a pružnost, díky čemuž ji lze přehodit přes pacientovo tělo, a rouška se velmi dobře přizpůsobí tělu a efektivně izoluje chirurgickou ránu
- vnitřní tenká vrstva brání prostupu tekutin a bakterií
- netkaná vrstva na straně pacienta je příjemná na dotyk a je savá; během dlouhých operací snižuje riziko podchlazení pacienta, brání podráždění kůže a při aplikaci lokální anestezie zajišťuje pacientovi pohodlí při dotyku s rouškou
- má antistatické vlastnosti
- je organicky kompatibilní - nedráždí, nezpůsobuje citlivost, ani není cytotoxická

Roušky Blue Comfort mohou mít např. lepicí pásky a různě tvarované otvory.


Laminát Blue Comfort splňuje požadavky EN 13795.

Použití:

- nabízeno zvlášť nebo jako součást operačních souprav - pro zakrytí pacienta po vymezení operačního pole, zajišťuje bezpečnost pacienta a zdravotnického personálu

Rozměry a balení:

- široká škála velikostí
- sterilní: baleno v papírovém sáčku po 1; navíc lze jednotlivé sterilní roušky balit do kartonového dávkovače, který umožní organizaci a uskladnění výrobků v nemocnici
- nesterilní: baleno v plastovém pytlí po 10 až 30 ks

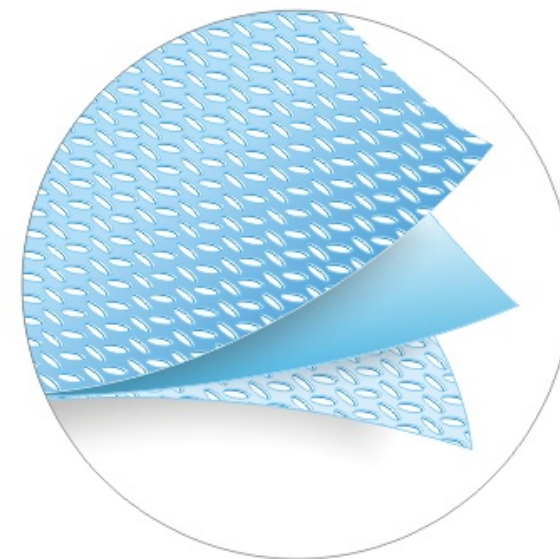

>>