

Blue Special (také nazýván L2) je třívrstvý laminát, který je charakterizován:

- zachovává si velkou pevnost i během dlouhých operací a operací s vysokou vlhkostí
- tenká vrstva zajišťuje kompletní ochranu proti prostupu mikrobů a tvoří efektivní bariéru vůči kapalinám
- vysoká a rychlá savost díky netkané vrstvě speciální struktury použité na straně personálu - prostorové provedení usnadňuje udržení a rozložení kapaliny na povrchu netkané textilie, čímž eliminuje riziko odkapávání kapaliny z povrchu roušky
- antistatické vlastnosti
- organicky kompatibilní - nedráždí, nezpůsobuje citlivost, ani není cytotoxická

Roušky Blue Special mohou mít např. lepicí pásky a různě tvarované otvory.


Laminát Blue Special splňuje požadavky EN 13795.

Použití:

- nabízeno zvlášť nebo jako součást operačních souprav - pro zakrytí pacienta po vymezení operačního pole, zajišťuje bezpečnost pacienta a zdravotnického personálu

Rozměry a balení:

- široká škála velikostí
- sterilní: baleno v papírovém sáčku po 1; navíc lze jednotlivé sterilní roušky balit do kartonového dávkovače, který umožní organizaci a uskladnění výrobků v nemocnici
- nesterilní: baleno v plastovém pytli po 10 až 250 ks

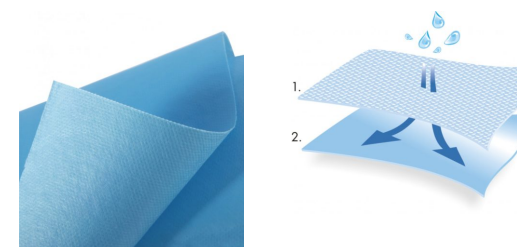

MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

>>