Dialyzační sada Matoset – aplikace

Příklad sady pro dialýzu MA-991-ZEST-487.

1




Před zahájením procedury si umyjte ruce (odborník a pacient).

2



K provedení procedury si připravte desinfekční prostředek, zaškrcovadlo, vhodné kanyly pro začátek i konec procedury.

3

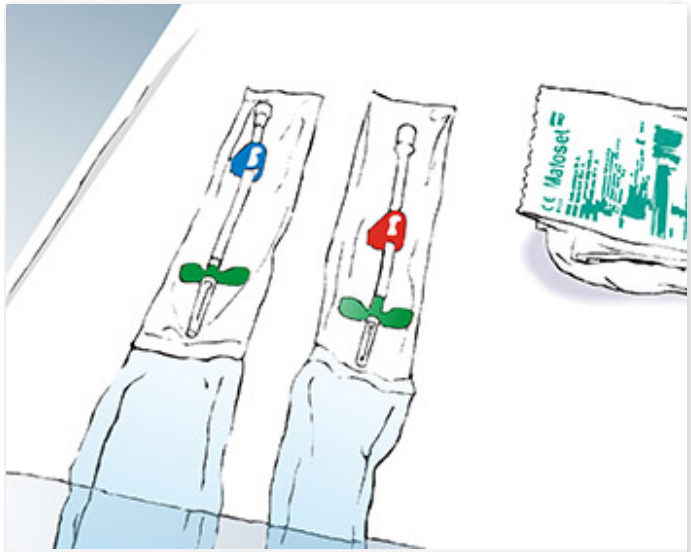

Vyjměte sterilní roušku a umístěte ji pod předloktí pacienta.


©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026

4



»

5

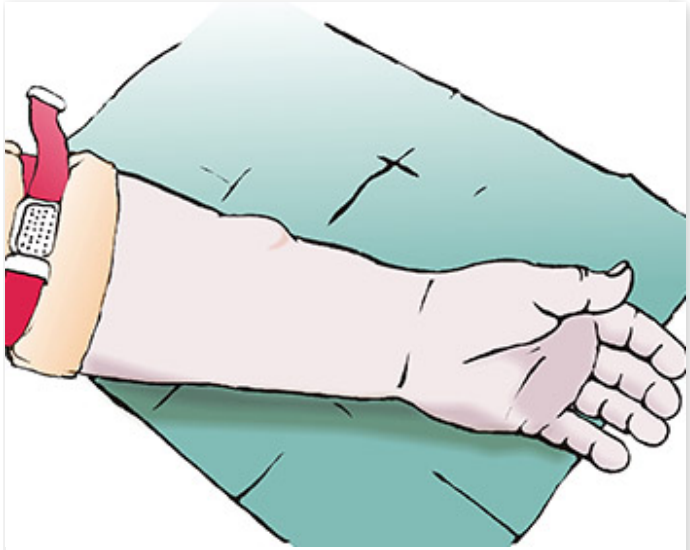

Poté si dejte jednu rukavici na levou ruku a druhou na sterilní část otevřeného obalu.


6



»

©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026

7

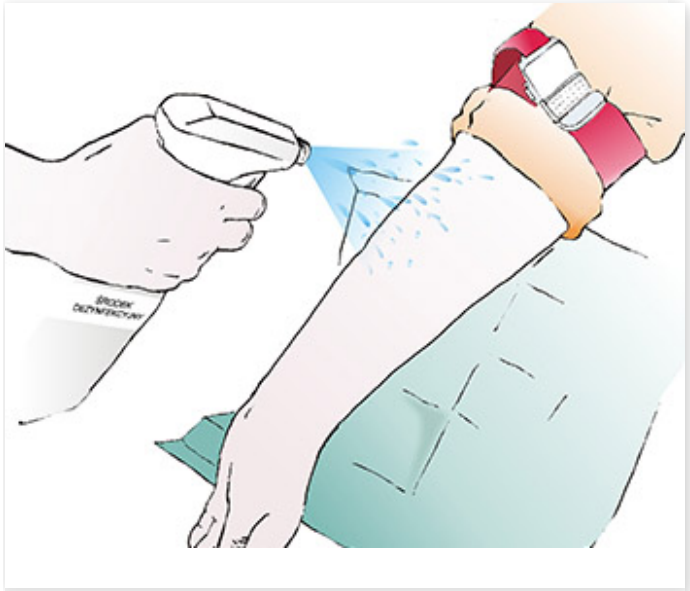

Dezinfikujte předloktí pacienta pomocí připravené dezinfekční kapaliny a sterilních tamponů ze soupravy.

8



»


9



»

©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026

10

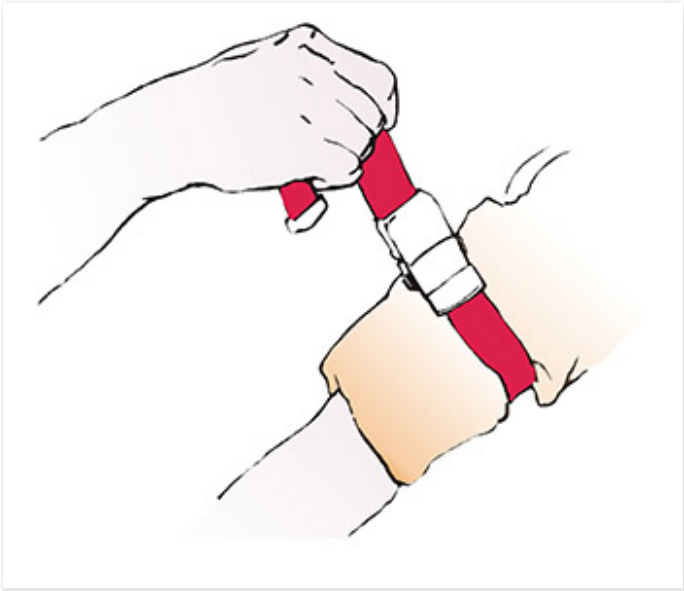


Utáhněte zaškrcovadlo.

11



Navlékněte si pravou rukavici.


12

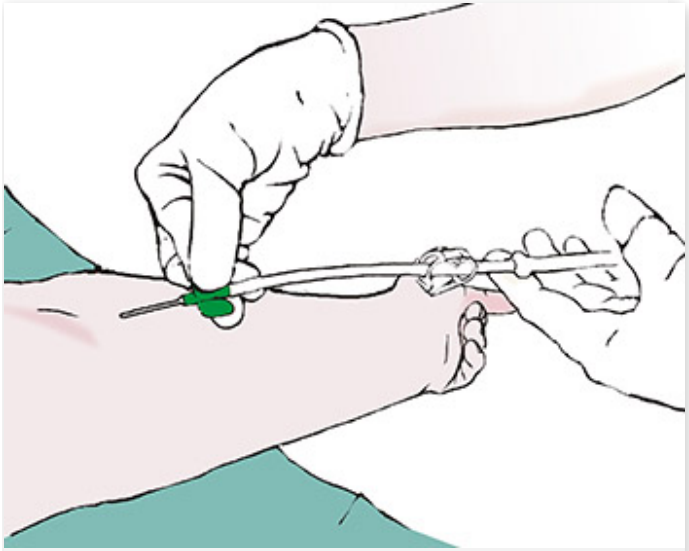

Umístěte kanyly do žil.


©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026

13

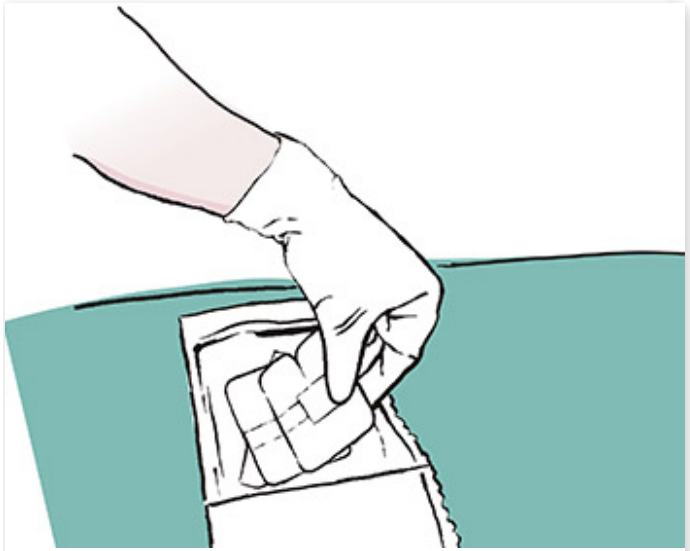


Po zavedení každé kanyly je zafixujte speciálním krytím pro fixaci kanyly (také v sadě).

14

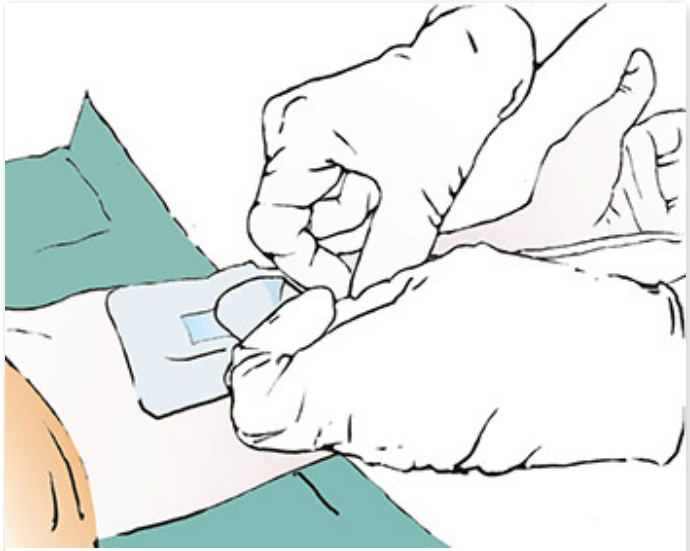

»


15

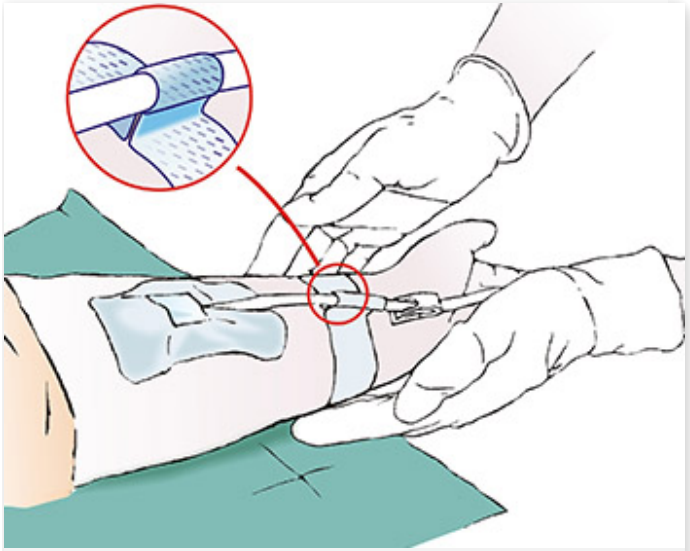

Na konci zajistěte odtok kanyly pomocí netkaných lepicích pásek.

©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026

16

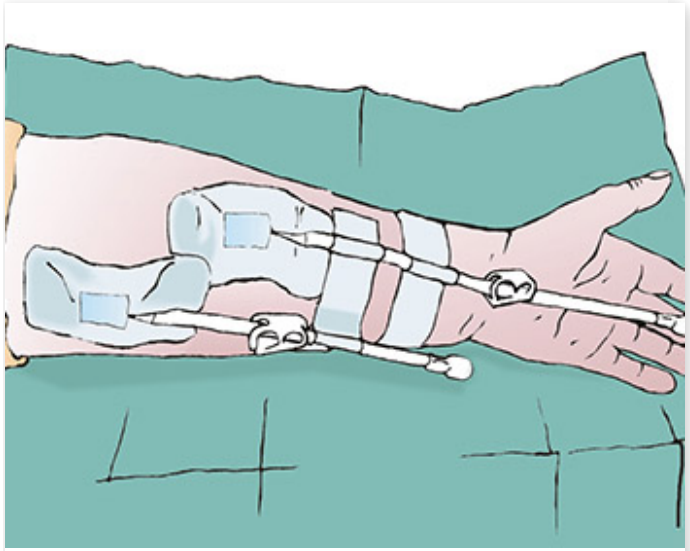

Nyní je pacient napojen na „umělou ledvinu“. Dialýza trvá 3-4 hodiny.

©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026