Matoset sada pro odpojení dialýzy – způsob aplikace

Příklad sady pro odpojení dialýzy MA-991-ZEST-488.

1



Před dokončením procedury si umyjte ruce (odborník).

2



Otevřete sadu pro odpojení dialýzy.

3



Nasaďte pacientovi jednu rukavici.

©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026


Matoset sada pro odpojení dialýzy – způsob aplikace

4




Poté si specialista nasadí obě rukavice.

5

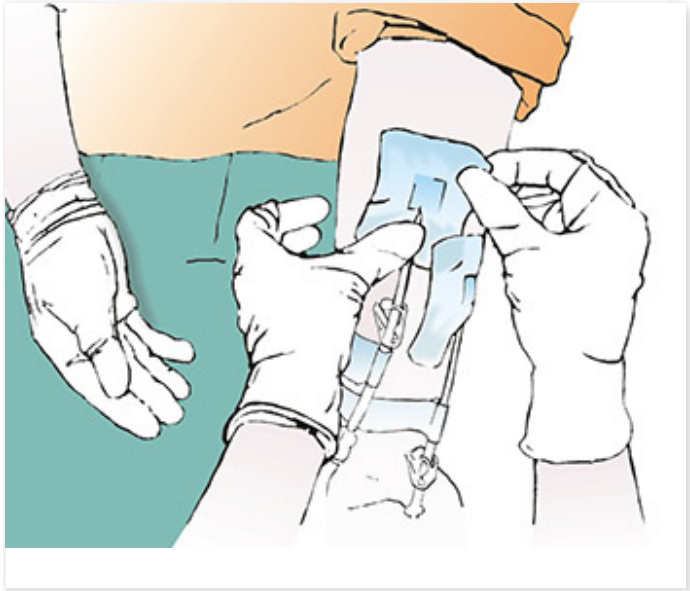

Postupně vyjměte kanyly a s pacientovou pomocí zajistěte místa vpichu tampony.


6

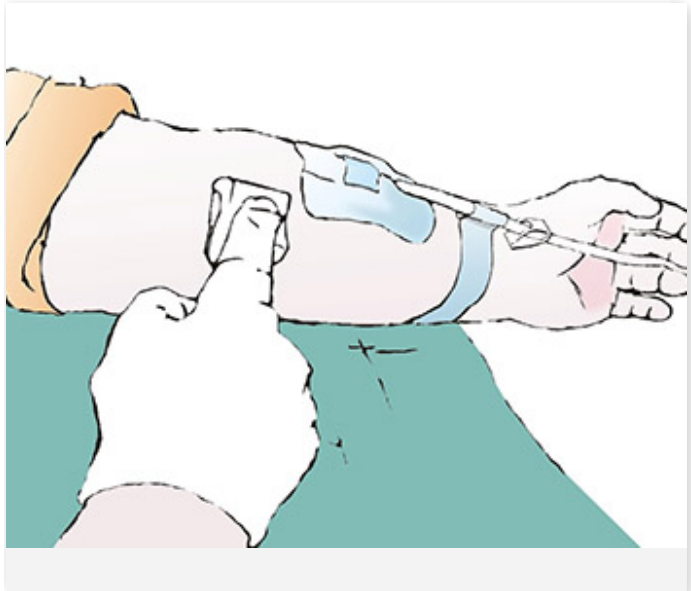

»

©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026

7

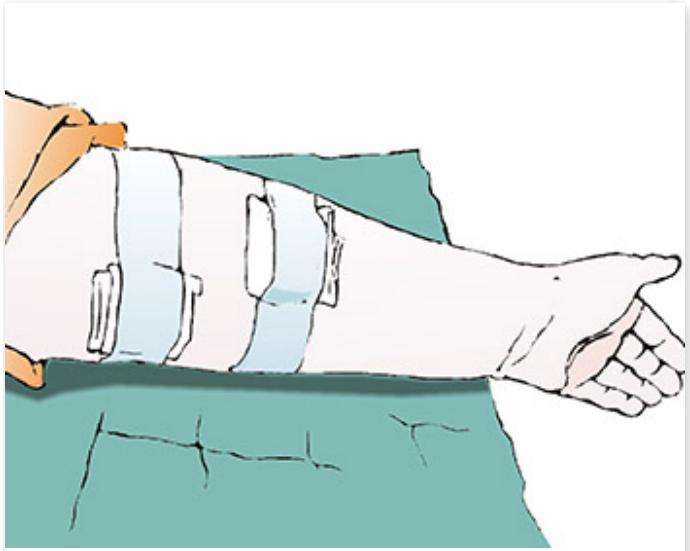

Po odstranění obou kanyl musí být místa vpichu chráněna obvazy složenými z netkaných tamponů a lepicích pásek.

©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026